

アンケートにこたえて Amazon ギフト券をもらおう！



弊社製品 Thermo Scientific™ Nalgene™ ボトルの今後の製品開発やご提供に取り組むためにアンケートを実施しています。プラスチックボトルをご使用中、ご検討中の皆様からのご意見を募集しております。アンケートの回答所要時間は、約5分です。アンケートにご協力いただいた方のうち200名様に、Amazon ギフト券1,000円分をお送りいたします。

アンケート回答はこちらから

<https://www.thermofisher.com/jp-bottle-chemo-survey>

回答期限：2019年10月31日(木)

※各種材質で作られた60 mLサイズの
ボトルサンプルパックもご希望にあ
わせてお送りさせていただきます。



ボトルサンプルパック

Nalgene プラスチックボトル

• 溶出の少ないボトル

高品質バージン樹脂のみ使用、可塑剤・添加剤不使用。

• 材質、形状、サイズのバリエーションが豊富

USP Class VI の材質を使用。マイクロバイアルから 20 L までの幅広いラインアップ。

• 液漏れ防止構造

ボトルとキャップをセットで使用することで液漏れを防止。



キャップ内側に一体成型されたシールリングは、斜めになったボトル口のエッジに密着して、ガスケットやライナーを使用しなくても液漏れを防止します

キャップとボトルのねじ山はセミバットレス型で深く成型されており、過剰トルクによるすべりや空回りがなく高い密閉性を維持できます



Nalgene クリーンボトル



— 国内専用工場による洗浄・滅菌サービス —

• クリーンルーム内作業、高品質薬剤の保管、半導体、電子材料などの用途

• 洗浄作業の効率化

お客様のニーズにあわせ、洗浄および滅菌の条件設定を行い、洗浄証明書や滅菌証明書を発行いたします。

洗浄フロー

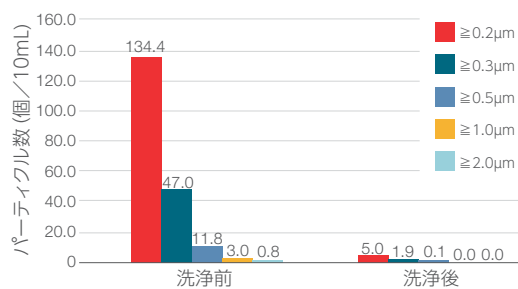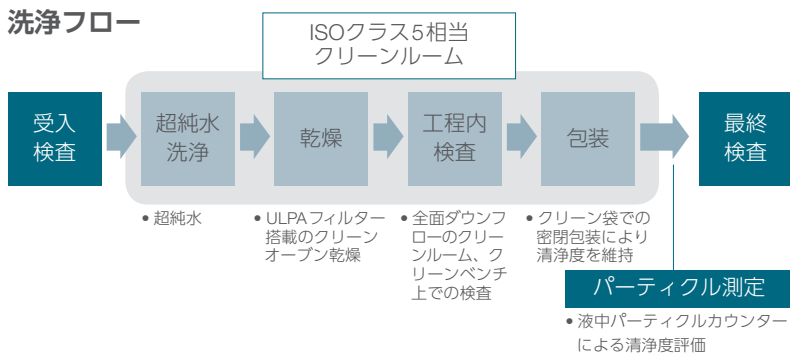

液中パーティクルカウンターによる洗浄効果測定
超純水による洗浄後にボトル内部のパーティクル数が減少

クリーンボトルに関するお問い合わせは info.LSG.jp@thermofisher.com までお願いいたします。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
©2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。Amazonは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
ここに記載されている内容は、予告なく変更することがあります。
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。
最新情報は当社Web ページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。 www.thermofisher.com/jp-tc-LSP005_A1907ML

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL: 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com
 オーダーサポート TEL: 03-6832-9260 FAX: 03-6832-9261
 営業部 TEL: 03-6832-9270 FAX: 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

thermofisher.com